

# BiopSafe® Biopsy Container

4 % formaldehido neutralus buferinis tirpalas



BiopSafe ApS  
Bygstubben 4  
DK-2950 Vedbæk  
www.biopsafe.com

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (20 ML IR 60 ML)

BiopSafe® biopsijos talpykla yra uždara formalino sistema, kurią sudaro talpykla, dangtelis, matrica, filtras ir formalino skystis. Formalinas yra dangtelyje esančioje kapsulėje. Įdėjus audinį į talpyklą, dangtelis uždedamas ir uždaromas, šitaip išleidžiant formaliną. BiopSafe® biopsijos talpykla valdoma rankiniu būdu.

## NUMATYTASIS NAUDOJIMAS

BiopSafe® biopsijos talpykla skirta audiniams konservuoti uždarose formalino sistemoje.

## NUMATYTASIS NAUDOTOJAS

BiopSafe® biopsijos talpykla skirta naudoti slaugytojams, laboratorijos technikams ar kitiems darbuotojams, išmokytiems naudoti biopsijos talpyklas.

## TURINYS

BiopSafe® biopsijos talpykla, kurioje yra 4 % formaldehido neutraliame buferiniame tirpale (pH 7,0) su 0,2 % metanolio (10 % formalino tirpalas).

## LAIKYMAS

BiopSafe® biopsijos talpyklą reikia laikyti vertikaliaje padėtyje nuo +10 °C iki +25 °C temperatūroje, apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių ir tinkamai vėdinamoje patalpoje.

Būtina panaudoti iki galiojimo pabaigos datos.

## GALIOJIMO PABAIGOS DATA

Žr. BiopSafe® biopsijos talpyklos etiketę.

BiopSafe® biopsijos talpyklos tinkamumo naudoti terminas yra 2 metai.

## AUDINIO / BIOPSIJOS DYDIS

Į 20 ml BiopSafe® biopsijos talpyklą rekomenduojama dėti nuo 1 mm<sup>3</sup> iki 1 cm<sup>3</sup> dydžio audinius.

Į 60 ml BiopSafe® biopsijos talpyklą rekomenduojama dėti nuo 2 mm<sup>3</sup> iki 3 cm<sup>3</sup> dydžio audinius.

## ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS



- Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- Įtariama, kad sukelia genetinius defektus.
- Gali sukelti vėžį.
- Prieš naudojant gauti specialias instrukcijas.
- Stengtis neįkvėpti garų / aerosolio.
- Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių / veido apsaugos priemones.
- Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
- Turinį / talpyklą išmesti į vietinę atliekų surinkimo vietą.
- Skirta tik profesionaliems naudotojams.
- Vengti tiesioginio sąlyčio su dangtelyje esančiu formaldehido tirpalu.

## ŠALINIMAS

Formaldehidas laikomas pavojinga atlieka.

Turinį / talpyklą išmeskite pagal vietinius reikalavimus.

## MĖGINIŲ ĖMIMO PROCEDŪRA


Mūvėkite apsaugines medicinines pirštines (butilo arba nitrilo) ir naudokite akių apsaugos priemones.

## INCIDENTAI

Jei BiopSafe® biopsijos talpykla netyčia suaktyvinama arba pažeidžiama, įdėkite BiopSafe® biopsijos talpyklą į uždarą konteinerį ir išmeskite pagal vietinius reikalavimus. Įvykus rimtam incidentui, apie jį reikia pranešti BiopSafe® adresu info@biopsafe.com, taip pat šalies, kurioje yra įsisteigęs naudotojas, kompetentingai institucijai.


# BiopSafe<sup>®</sup> Biopsy Container

## FREMGANGSMÅDE

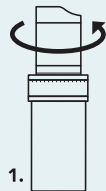


1.

1. Pasukite dangtelį su formalinu prieš laikrodžio rodyklę ir atidarykite BiopSafe<sup>®</sup> biopsijos talpyklą.

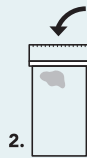


2.

2. Įdėkite audinį į tuščią indą.

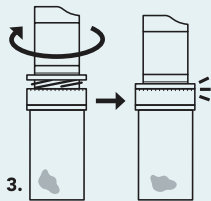


3.

3. Sukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol jį visiškai uždarysite.  
**PASTABA. NEPALIKITE TARPO TARP DANGTELIO IR TALPYKLOS.**

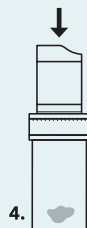


4.

4. Išleiskite formaliną stipriai paspausdami dangtelio viršų.

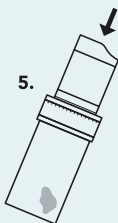

5.

5. Pakreipkite BiopSafe<sup>®</sup> biopsijos talpyklą maždaug 45 laipsnių kampu ir 3–5 kartus pakratykite, kol iš dangtelio ištekės visas formalinas. Įsitinkite, kad audinys yra visiškai panardintas į formaliną.

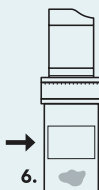

6.

6. Vadovaudamiesi vietinėmis procedūromis, ant BiopSafe<sup>®</sup> biopsijos talpyklos užklijuokite etiketę su paciento duomenimis ir kita svarbia informacija