

BiopSafe® Biopsy Container

4 % formaldehido neutralus buferinis tirpalas



BiopSafe ApS
Bygstubben 4
DK-2950 Vedbæk
www.biopsafe.com

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (20 ML IR 60 ML)

BiopSafe® biopsijos talpykla yra uždara formalino sistema, kurią sudaro talpykla, dangtelis, matrica, filtras ir formalino skystis. Formalinas yra dangtelyje esančioje kapsulėje. Įdėjus audinį į talpyklą, dangtelis uždedamas ir uždaromas, šitaip išleidžiant formaliną. BiopSafe® biopsijos talpykla valdoma rankiniu būdu.

NUMATYTASIS NAUDOJIMAS

BiopSafe® biopsijos talpykla skirta audiniams konservuoti uždarose formalino sistemoje.

NUMATYTASIS NAUDOTOJAS

BiopSafe® biopsijos talpykla skirta naudoti slaugytojams, laboratorijos technikams ar kitiems darbuotojams, išmokytiems naudoti biopsijos talpyklas.

TURINYS

BiopSafe® biopsijos talpykla, kurioje yra 4 % formaldehido neutraliame buferiniame tirpale (pH 7,0) su 0,2 % metanolio (10 % formalino tirpalas).

LAIKYMAS

BiopSafe® biopsijos talpyklą reikia laikyti vertikaliaje padėtyje nuo +10 °C iki +25 °C temperatūroje, apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių ir tinkamai vėdinamoje patalpoje.

Būtina panaudoti iki galiojimo pabaigos datos.

GALIOJIMO PABAIGOS DATA

Žr. BiopSafe® biopsijos talpyklos etiketę.

BiopSafe® biopsijos talpyklos tinkamumo naudoti terminas yra 2 metai.

AUDINIO / BIOPSIJOS DYDIS

Į 20 ml BiopSafe® biopsijos talpyklą rekomenduojama dėti nuo 1 mm³ iki 1 cm³ dydžio audinius.

Į 60 ml BiopSafe® biopsijos talpyklą rekomenduojama dėti nuo 2 mm³ iki 3 cm³ dydžio audinius.

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS



- Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- Įtariama, kad sukelia genetinius defektus.
- Gali sukelti vėžį.
- Prieš naudojant gauti specialias instrukcijas.
- Stengtis neįkvėpti garų / aerosolio.
- Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių / veido apsaugos priemones.
- Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
- Turinį / talpyklą išmesti į vietinę atliekų surinkimo vietą.
- Skirta tik profesionaliems naudotojams.
- Vengti tiesioginio sąlyčio su dangtelyje esančiu formaldehido tirpalu.

ŠALINIMAS

Formaldehidas laikomas pavojinga atlieka.

Turinį / talpyklą išmeskite pagal vietinius reikalavimus.

MĖGINIŲ ĖMIMO PROCEDŪRA


Mūvėkite apsaugines medicinines pirštines (butilo arba nitrilo) ir naudokite akių apsaugos priemones.

INCIDENTAI

Jei BiopSafe® biopsijos talpykla netyčia suaktyvinama arba pažeidžiama, įdėkite BiopSafe® biopsijos talpyklą į uždarą konteinerį ir išmeskite pagal vietinius reikalavimus. Įvykus rimtam incidentui, apie jį reikia pranešti BiopSafe® adresu info@biopsafe.com, taip pat šalies, kurioje yra įsisteigęs naudotojas, kompetentingai institucijai.

BiopSafe® Biopsy Container

FREMGANGSMÅDE

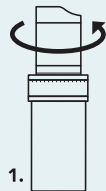


1.

1. Pasukite dangtelį su formalinu prieš laikrodžio rodyklę ir atidarykite BiopSafe® biopsijos talpyklą.




2.

2. Įdėkite audinį į tuščią indą.

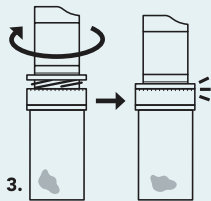


3.

3. Sukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol jį visiškai uždarysite.
PASTABA. NEPALIKITE TARPO TARP DANGTELIO IR TALPYKLOS.

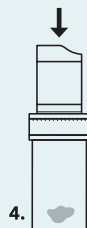


4.

4. Išleiskite formaliną stipriai paspausdami dangtelio viršų.

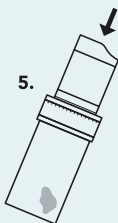

5.

5. Pakreipkite BiopSafe® biopsijos talpyklą maždaug 45 laipsnių kampu ir 3–5 kartus pakratykite, kol iš dangtelio ištekės visas formalinas. Įsitikinkite, kad audinys yra visiškai panardintas į formaliną.

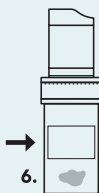

6.

6. Vadovaudamiesi vietinėmis procedūromis, ant BiopSafe® biopsijos talpyklos užklijuokite etiketę su paciento duomenimis ir kita svarbia informacija